



SA-232X

Autoclave/Esterilizador Microprocesador

- Panel de control simple y fácil de usar
- Bloqueo automático de puerta por presión
- Protección contra sobrecalentamiento
- Secado a puerta cerrada
- Cierre de seguridad en la puerta
- Protección contra el exceso de presión

Su socio confiable en esterilización



LO MEJOR EN VALOR

Costo mínimo, eficiencia máxima

Su alta durabilidad reduce el costo de mantenimiento



TODO ES SENCILLO

Proceso de operación simple, indicadores intuitivos
Conveniente y confiable, esterilización para todos



Características ▼

Control simple

Solamente, rellene el agua, defina el programa de esterilización e inicie el proceso. El esterilizador está diseñado para realizar una esterilización automática sin ninguna ayuda adicional, solo se necesita esperar que se complete el proceso.

Luz indicadora de procesos

Gracias a los indicadores intuitivos, se puede rastrear fácilmente cada fase del proceso de esterilización, además de avisar cuando la esterilización ha sido completada

Escape y drenaje automático *

El sistema de liberación de presión y drenaje de agua automatizado, ayuda a acortar en gran medida el tiempo del ciclo de esterilización

Secado a puerta cerrada *

Una vez terminado la esterilización, el esterilizador entrará automáticamente en el programa de secado mediante bomba de aire. El sistema de secado a puerta cerrada mejora la eficiencia del secado en un 90%

Filtro de aire HEPA *

Mediante el uso de un filtro HEPA (Recogedor de partículas de alta eficiencia) de alta rendimiento, se intercepta el 99.97% de las partículas en el aire y se asegura que los objetos esterilizados se mantengan estériles.


* Para funciones opcionales

SEGURIDAD

Seguridad constante y eficacia constante
este es el esterilizador perfecto que nosotros ofrecemos

Bloqueo automático de puerta por presión

Cuando la cámara empieza a presurizar, el cerrojo de la puerta se cierra automáticamente para asegurar la seguridad del usuario

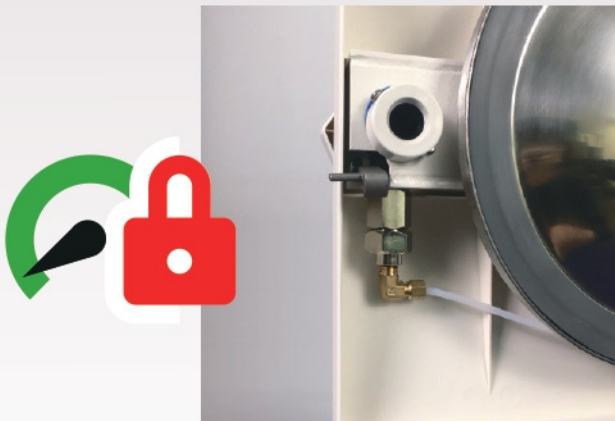


Cierre de seguridad en la puerta

Un mecanismo de enganche actúa como un segundo mecanismo de protección de la puerta, compruebe minuciosamente por seguridad




Protección contra sobrecalentamiento

Durante el ciclo de esterilización, si la temperatura es muy alta debido a un error, el protector cortará la electricidad para prevenir que el esterilizador se sobrecaliente, protegiendo al usuario y extendiendo la vida útil del equipo

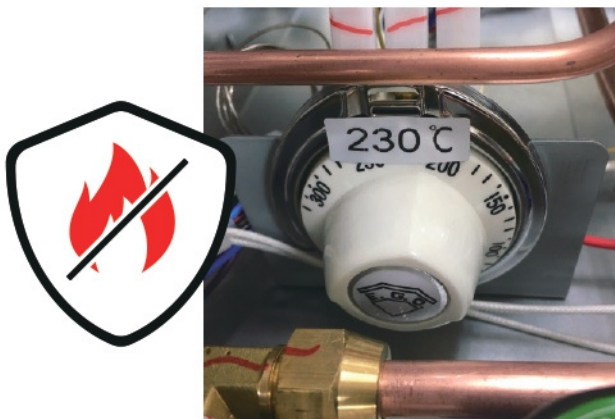

Protección contra el exceso de presión

Durante el ciclo de esterilización, si la presión es muy alta debido a un error, el protector reducirá la presión para prevenir que la sobrepresión en la cámara, protegiendo al usuario y extendiendo la vida útil del equipo

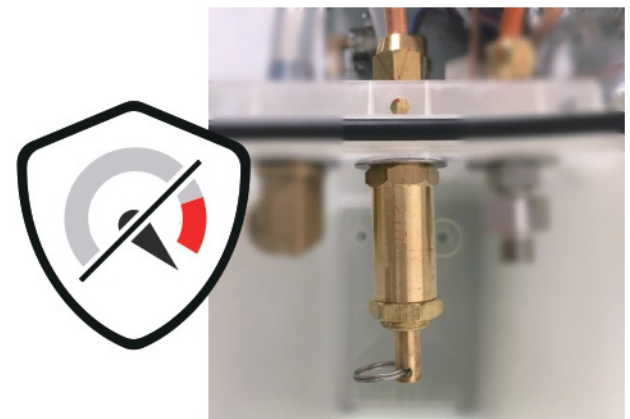


Número del modelo		SA-232X
Volumen de la cámara		16 Litros / 4.2 Galones
Tamaño de la cámara Diámetro x profundidad		ø 230 x 410 (mm) ø 9.05 x 16.14 (pulgadas)
Dimensiones generales W x H x D		501 x 406 x 537(mm) 19.72 x 15.98 x 21.14(pulgadas)
Peso neto		28 kg / 62 lbs
Llenado de agua		Tank-Man *
Volumen del tanque de agua		4200 (cc)
Consumo de agua (por ciclo)		300 - 450(cc)
Sistema de control		Microprocesador
Opciones de temperatura		118 ~ 134(°C)
Tiempo de esterilización		4 / 15 / 30 (min)
Secado(Opcional)		Escape y drenaje automático, secado a puerta cerrada con bomba de aire
Tiempo de secado(Opcional)		18 (min)
Voltaje(V)		230V / 110V, 50/60Hz
Corriente(A) Electricidad(W)	Sin secado(Estándar)	6.1A / 1400W (230V) 11A / 1200W (110V)
	Secado con bomba de aire(Opcional)	7.7A / 1763W (230V) 14.2A / 1563W (110V)
Dispositivo de seguridad		• Bloqueo automático de puerta por presión • Protección contra sobrecalentamiento • Cierre de seguridad en la puerta • Protección contra el exceso de presión
Estándares y directivas		CE (Cumplimiento de la normativa europea) 2014/68/EU (PED; Directiva sobre equipos de presión) EN 61010-1 (Requisitos de seguridad para el control de las mediciones y el uso en el laboratorio) EN 61010-2-040 (Requisitos de seguridad para esterilizadores utilizados para tratar materiales médicos) EN 61326-1 (EMC; Equipo eléctrico para medición, control y uso en laboratorio) ISO 13485:2003 (Cumple con el sistema de calidad) RoHS (Directiva de restricción de sustancias peligrosas 2002/95/CE)

* "Tank-man" - Contiene un depósito de agua, pero sigue siendo necesario encender/apagar manualmente mediante una perilla para llenar la cámara

Accesorios



Canasta

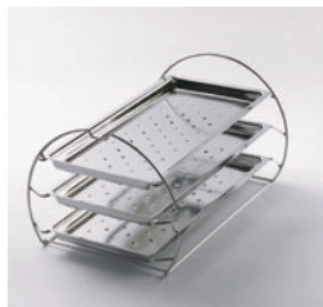

Juego de bandejas



Caja



Bolsas de esterilización



Filtro de agua RO



Destilador de agua



Cham-Mate



SA-232X



SA-252F



SA-300H

Número del modelo	Sistema de control	Volumen de la cámara	Tiempo de esterilización	Tiempo de secado	Dimensiones generales	Peso neto
SA-232X	Microprocesador	16L	4 / 15 / 30 min	18 min	501 x 406 x 537 (mm)	28 kg
SA-252F	Maquinaria eléctrica	24 L	0 ~ 60 min	0 ~ 60 min	540 x 450 x 630 (mm)	45 kg
SA-300H	Maquinaria eléctrica	40L	0 ~ 60 min	0 ~ 60 min	600 x 470 x 740 (mm)	66 kg

Esterilización duradera, auténtica y eficaz

Establecido en 1992, STURDY se convirtió en uno de los líderes de autoclaves en Taiwán. Nos hemos comprometido a proporcionar autoclaves fiables y duraderos en todo el mundo durante casi 30 años. De hecho, STURDY está presente en más de 80 países y cuenta con 400 distribuidores alrededor de todo el mundo.

La filosofía empresarial de STURDY de integridad, innovación, seguridad, calidad y utilidad es reflejada a través de sus productos

Gracias a décadas de experiencia en esterilización, educación comprensiva y entrenamiento, además se dispone de un excelente servicio posventa.

El diseño, el desarrollo y hasta la fabricación de nuestros autoclaves son 100% MIT (Hechos en Taiwán). Además, todos los productos pasan por estrictas normas y directivas de seguridad y calidad, como ISO 13485, CE, Taiwan GMP, PED, FDA 510K, ASME.



Por ello, STURDY se enorgullece de ser su "Socio confiable en esterilización - STURDY"

STURDY
APEX GROUP

168, Sec. 1, Zhongxing Road, Wugu District,
New Taipei City 24872, Taiwan
Tel: 886-2-2981-5245
Fax: 886-2-2984-8208(Office)
Email: foreign@sturdy.com.tw
www.sturdy.com.tw



Distributed by :